

TUTORIAL

Ficha de Prescrição

FEVEREIRO/2017



CONSIDERAÇÕES


Este tutorial foi desenvolvido afim de facilitar e minimizar possíveis erros gerados através de Ficha de Prescrição. Em cinco passos você conseguirá prescrever sua cadeira de forma assertiva. Alertamos que este documento poderá ser modificado para maior entendimento caso se faça necessário. Qualquer dúvida durante a etapa, favor entrar em contato, será um prazer poder ajudar.

SUMÁRIO

PASSO 1 - Abrindo o arquivo	2
PASSO 2 - "Defina o tamanho da cadeira"	2
PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"	4
	4
• escolha do chassi	5
• escolha do assento	6
• escolha do encosto	7
• escolha do tecido	8
• escolha do estabilizador de tronco	8
• escolha do apoio de pé	9
• itens adicionais para o apoio de pé	9
• escolha do apoio de braço	10
• escolha do apoio de cabeça	10
• escolha do cinto para tronco	10
• escolha do cinto para quadril	11
• escolha do tipo de mesa	11
• escolha dos acessórios finais	12
PASSO 4 - "Ficha de Produção - Expansão"	12
PASSO 5 - Salvando sua ficha	13

PASSO 1 - Abrindo o arquivo

Clique no arquivo "Expansão - Prescrição Cadeiras de Rodas" em seu computador. A planilha abrirá com uma caixa de senha (conforme ilustra a imagem abaixo). Clique em "Somente Leitura". Isso garantirá que a planilha modelo não sofra alterações.

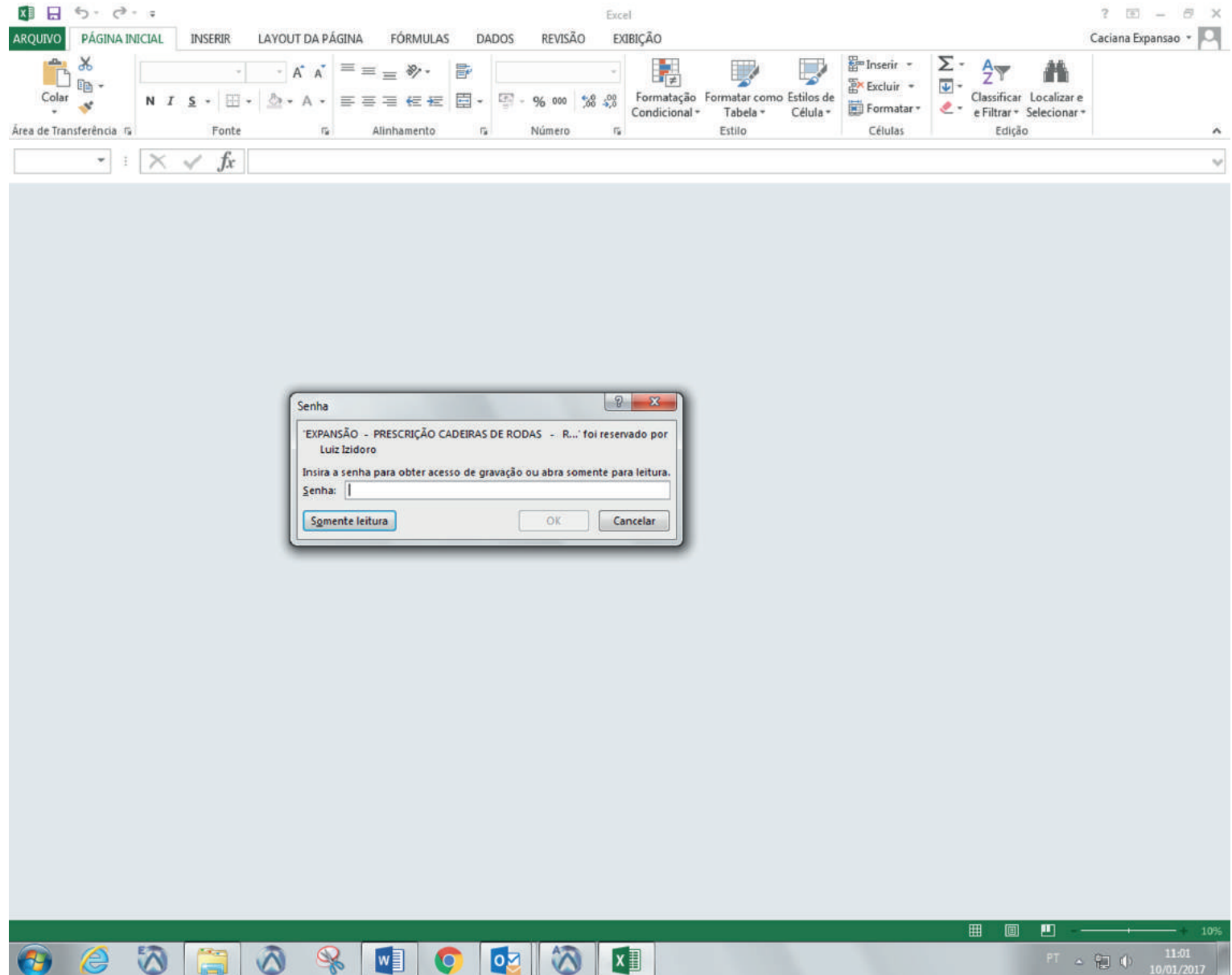

caixa de senha para abertura da planilha

IMPORTANTE: É indicado que a planilha seja salva com o nome do cliente ou número do orçamento de quem estará prescrevendo.

PASSO 2 - "Defina o tamanho da cadeira"

Este é o modo que planilha abrirá. Note que na parte inferior há três abas: "Defina o tamanho da cadeira", "Monte aqui sua cadeira de rodas" e "Ficha de produção - Expansão". Comece pela "Defina o tamanho da cadeira". É importante ressaltar que todos os detalhes devem ser preenchidos corretamente, pois uma vez que a ficha de produção for finalizada, ela obedecerá aos critérios escolhidos.

PASSO 2 - "Defina o tamanho da cadeira"

1

NÚMERO DE PEDIDO INTERNO EXPANSÃO
NÚMERO PEDIDO EXPANSÃO

LOCALIDADE
LOCAL

INSIRA SEU NOME AQUI
NOME

INSIRA SEU CONTATO NA EXPANSÃO
CONTATO EXPANSÃO

DATA
DATA

INSIRA SUA REVENDA
REVENDA

INSIRA O NOME DA T.O. / FÍSIO
FÍSIO / T.O. EXPANSÃO

CONTROLE DO CLIENTE
CONTROLE DO CLIENTE

DADOS - DIMENSÕES TOMADAS DO PACIENTE - PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO

NOME DO PACIENTE

INSIRA AQUI O NOME DO PACIENTE DIMENSIONADO

SEXO DO PACIENTE

IDADE DO PACIENTE

LAGURA DO QUADRIL

PROFUNDIDADE DO ASSENTO

ALTURA DO TRONCO

ALTURA DO ENCOSTO

SUGESTÃO DE MODULAÇÃO
(BASEADO NAS MEDIDAS INFORMADAS)

1ª OPÇÃO

QUAL É A FOLGA???

2ª OPÇÃO

QUAL É A FOLGA???

3ª OPÇÃO

QUAL É A FOLGA???

LAGURA DO QUADRIL	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	LAGURA DO TRONCO	ALTURA DO ENCOSTO

TAMANHO CHASSIS FABRICANTE	TAMANHOS MODULAÇÕES EXPANSÃO
-X-	30
33	34
37	36
41	40
45	44
50	46

- CHASSIS Sistema Canguru**

 1. Rodas traseiras aro 16 infláveis
 2. Rodas dianteiras aro 6
 3. Fechamento em X
 4. Mancal com ajuste de centro de gravidade para a personalização

Sistema Canguru: Assentos

 1. Várias modulações terapêuticas
 2. Ângulos ajustáveis de inclinação
 3. Ajustável em profundidade

Busque Criar Modulações Padronizadas:

Exemplo:
 Encosto plano rígido com estabilizadores laterais de tronco curvos ajustáveis
 Assento em onda com estabilizadores de quadris ajustáveis
 Estabilizador de cabeça curvo multidirecional
 Contra-extensor-abdutor-adutor (CEAA)
 Apoio de pés plano ajustável em altura

abertura da planilha; menu de planilhas inferiores

No painel, veja caixa 1 (indicada na imagem). Você preencherá os dados como nome, contato, local, revenda, nome do terapeuta, data, número do pedido e controle do cliente. Após o preenchimento, note o campo "Dados - Dimensões tomadas do paciente - Preenchimento obrigatório" (indicado na caixa com o número dois), que vem logo abaixo. Preencha os campos nas caixas azuis, localizadas abaixo dos croquis.

Para finalizar, observe a caixa "Sugestão de modulação" (indicado na imagem com o número três). Ela será automaticamente preenchida e dará as opções inviáveis de descarte.

A seguir, segue um exemplo da "Sugestão de Modulação" após preenchimento.

PASSO 2 - "Defina o tamanho da cadeira"

AÇÃO	1.ª OPÇÃO	2.ª OPÇÃO	3.ª OPÇÃO
	44	46	
5)	QUAL É A FOLGA???	QUAL É A FOLGA???	QUAL É A FOLGA???
Medida	LARGURA DO QUADRIL	2 CM	4 CM
	PROFUNDIDADE DO ASSENTO	9 CM	9 CM
	LARGURA DO TRONCO	8 CM	10 CM
	ALTURA DO ENCOSTO	6 CM	6 CM

1.ª DESCARTE	2.ª DESCARTE	3.ª DESCARTE
34	36	40
QUAL É A FOLGA???	QUAL É A FOLGA???	QUAL É A FOLGA???
NÃO	NÃO	0 CM
NÃO	NÃO	NÃO
NÃO	NÃO	4 CM
NÃO	NÃO	1 CM

Após o término do preenchimento da aba "Defina o tamanho da cadeira", iremos para a aba "Monte aqui sua cadeira de rodas". Abaixo, veja a disponibilidade destas na planilha.



processo de sugestão de modulação e descartes

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

Neste passo, todos os detalhes farão diferença. Reforçamos a importância do preenchimento e de conferir as opções escolhidas. Para iniciar, começaremos por "Modelo de Cadeira", conforme figura abaixo.

- MODELO DE CADEIRA

demonstração do processo de modelo de cadeira

As cadeiras do lado esquerdo são catalogadas como perfil adulto, embora possa ser realizada a adaptação para tamanhos infantis. Para a categoria infantil é indicado os carrinhos localizados do lado direito. Neste processo você irá selecionar o modelo que você quiser. Para selecionar, basta clicar na caixas correspondentes.

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DO CHASSI

ESCOLHA DO CHASSIS

[ESCOLHA DO TAMANHO DO CHASSIS =>](#)

SEM ESCOLHA - TAMANHO - 0

TIPO DE CHASSIS

CHASSIS TILT

FALTA ESCOLHER

CADEIRA TRANSFORM
 CADEIRA LEITO
 CHASSIS CANGURU

CHASSIS TILT

 TAMANHO 34
 TAMANHO 38
 TAMANHO 42
 TAMANHO 46
 FALTA ESCOLHER

CHASSIS CANGURU (FREEDOM)

 TAMANHO 33 (Expansão => 34)
 TAMANHO 37 (Expansão => 38)
 TAMANHO 41 (Expansão => 40)
 TAMANHO 45 (Expansão => 44)
 TAMANHO 50 (Expansão => 46)
 FALTA ESCOLHER

LARGURA MAX

0,0 CM

ALTURA MAX

0,0 CM

PESO MAX

0,0 KG

OBSERVAÇÕES - COMENTARIOS

INSIRA AQUI SEU COMENTARIO

demonstração do processo de escolha do chassi

Neste processo, selecione o chassi. A partir do momento que você selecionar o tamanho desejado na respectiva caixa, ao lado direito, na caixa destacada em vermelho aparecerá o tamanho, largura e peso máximo do chassi. Caso queira um chassi diferente, clique na caixa com o nome "Outros modelos de Chassis", localizada ao lado da caixa "Escolha do Chassis" e selecione. Você poderá também, digitar seu tipo específico.

OUTROS MODELOS DE CHASSIS

TAMANHO

VOU ESCOLHER OUTROS MODELOS

MODELOS

 OTOBRAS - K2
 OTOBRAS - ULX
 JAGUARIBE - AGILE
 OTTOBOCK - M0
 OTTOBOCK - M2
 OTTOBOCK - M6
 VOU ESCREVER O MODELO ABAIXO

CASO NAO EXISTA NA LISTA ACIMA,
ESCREVA NO QUADRO ABAIXO

ESCREVA AQUI SEU O NOME DO CHASSIS

Sujeito a confirmação de
DISPONIBILIDADE e COMPATIBILIDADE

ESCREVA AQUI SEU O NOME DO CHASSIS

demonstração da caixa de "Outros Modelos de Chassis"

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DO ASSENTO




demonstração da caixa de escolha de assento

Abaixo podemos ver mais detalhada a primeira parte da escolha do assento.



demonstração do processo de escolha do assento

Na caixa "Personalização do assento" indicada abaixo, você irá definir as especificações apenas para o modelo bioforma. Opções diferenciadas e tipos de assentos deverão ser descritas na caixa "observação" (de forma clara), localizada no canto direito, **conforme imagem acima**.

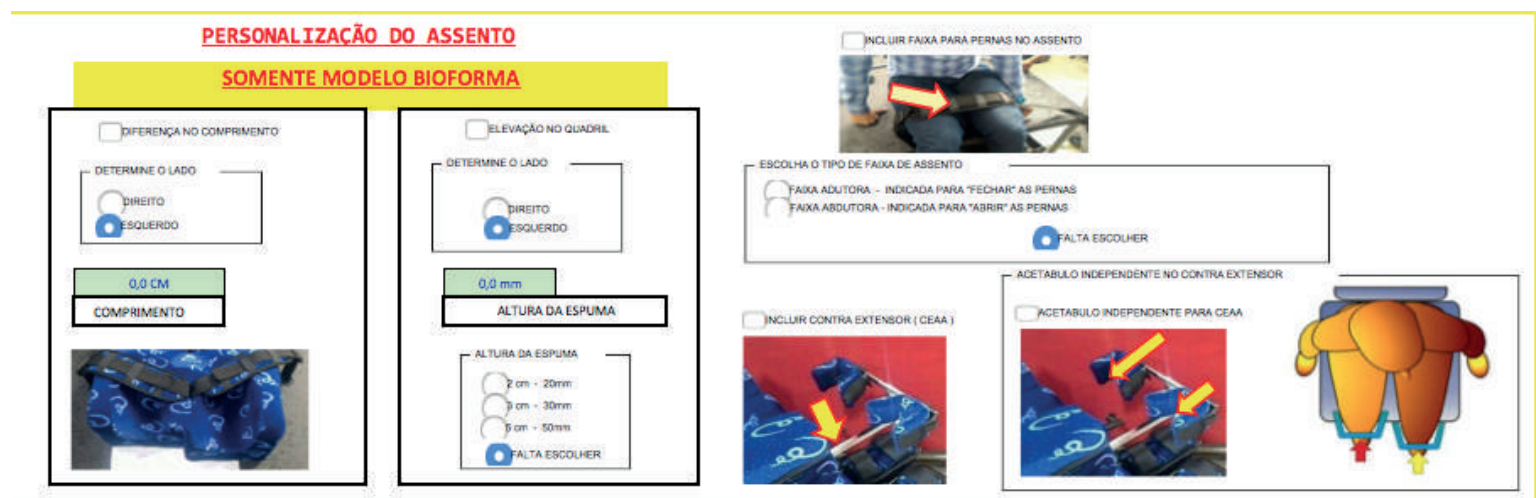

demonstração do processo de escolha do assento - personalização do assento

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DO ENCOSTO

Neste processo você escolherá o encosto da sua cadeira. Veja imagem abaixo detalhada.

ESCOLHA DO ENCOSTO

MODULAÇÃO ESCOLHIDA ENCOSTO
SEM ESCOLHA - TAMANHO SEM ESCOLHA


TIPO DE ENCOSTO


ENCOSTO AX2 (ESTABILIZADORES)
 ENCOSTO PLANO (MAIOR)
 FALTA ESCOLHER
 ENCOSTO BIOFORMA
 ENCOSTO ERGO




ESPUMA É APENAS PARA O ENCOSTO AX2

 ESPUMA VISCO ELÁSTICA







PLUMANTE DE SILICONE - APENAS PARA ENCOSTO ERGO

 RETIRAR O PLUMANTE DO ENCOSTO ERGOENVOLVENTE

OBSERVAÇÕES - COMENTARIOS

INSIRA AQUI SEU COMENTARIO

demonstração do processo de escolha do encosto

Após preenchida a primeira etapa, repare na caixa ao lado da "Escolha do Encosto", intitulada "Escolha da Modulação". A seguir, preencha as outras caixas conforme necessidades específicas. Qualquer informação ou escolha que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" localizada no canto direito, conforme imagem acima.

ESCOLHA DA MODULAÇÃO

DESEJO UTILIZAR TAMANHO MISTO


MODULAÇÕES

FALTA ESCOLHER

- TAMANHO 34
- TAMANHO 38
- TAMANHO 40
- TAMANHO 44
- TAMANHO 46

LARGURA TOTAL DO ENCOSTO
18,0 CM
20,0 CM
24,0 CM
28,0 CM
30,0 CM

RESTRINGIDOR DE OMBRO

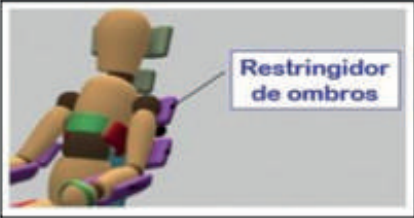

Restringidor de ombros


TAMANHO DO RESTRINGIDOR

PEQUENO - 15 X 10

GRANDE - 20 X 15

FALTA ESCOLHER

INCLUIR REDUTOR DE PROFUNDIDADE

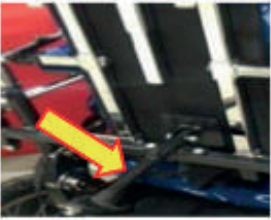


ESTA ABERTURA É APENAS PARA O ENCOSTO AX2

ESTA MEDIDA É TOMADA:
DA BASE DO ASSENTO ATÉ
A ALTURA DOS OMBROS
(DE BAIXO PARA CIMA)

ABERTURA PARA PASSAGEM DO CINTO

ALTURA DE PASSAGEM DO CINTO



INSERIR MEDIDA ->

demonstração do processo de escolha do encosto

7

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DO TECIDO

Neste processo você escolherá o tecido da sua cadeira. Clique na opção que desejar.

ESCOLHA DO TECIDO

ESCOLHA O PADRÃO DO TECIDO DA CADEIRA

CINZA

FALTA ESCOLHER

RÓXO (LILÁS)

AZUL ESCURO







OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo de escolha do tecido

- ESCOLHA DO ESTABILIZADOR DE TRONCO

Neste processo você escolherá o estabilizador de tronco. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.



ESCOLHA DO ESTABILIZADOR DE TRONCO

ESTABILIZADOR DE TRONCO

PLANO

SEM ESTABILIZADOR

CURVO

ESTE ACESSÓRIO É VETADO DE UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O ENCOSTOS:

- * BIOFORMA
- * PLANO (MAIOR)

ESCOLHA DA MODULAÇÃO

MODULAÇÕES

FALTA ESCOLHER

TAMANHO "PP"
 TAMANHO "P"
 TAMANHO "M"
 TAMANHO "G"

MEDIDAS (CM)	
8 X 2,50 X 15	
10 X 3,0 X 17	
13 X 3,0 X 20	
16 X 3,0 X 23	

PERSONALIZAÇÃO


UTILIZAR 03 ESTABILIZADORES AO INVÉS DE APENAS 02

Nesta opção, precisamos que seja especificado a localização

NO CASO DE ESTABILIZADOR ADICIONAL

ADICIONAR 01 ADICIONAL NO LADO DIREITO
 ADICIONAR 01 ADICIONAL NO LADO ESQUERDO

FALTA ESCOLHER

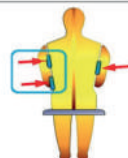

OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo de escolha do estabilizador de tronco

- ESCOLHA DO ESTABILIZADOR DE QUADRIL

Neste processo você escolherá o estabilizador de quadril. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

ESCOLHA DO ESTABILIZADOR DE QUADRIL

ESTABILIZADOR DE QUADRIL

PLANO SEM ESTABILIZADOR CURVO

ESTE ACESSÓRIO É VETADO DE UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM O ENCOSTOS:

- * BIOFORMA
- * PLANO (MAIOR)

ESCOLHA DA MODULAÇÃO

MODULAÇÕES

FALTA ESCOLHER

TAMANHO "P"

TAMANHO "M"

TAMANHO "G"

MEDIDAS (CM)
10 X 4,0 X 16
11 X 4,0 X 20
12 X 4,0 X 24

OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo de escolha do estabilizador de quadril

- ESCOLHA DO APOIO DE PÉ

Neste processo você escolherá o apoio de pé. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ESCOLHA DO APOIO DE PÉ

MODULAÇÃO ESCOLHIDA NA CADEIRA => SEM ESCOLHA - TAMANHO - 0

APOIO DE PÉ

APOIO PLANO APOIO EM P.A.D. FALTA ESCOLHER APOIO DE MADEIRA APOIO EM CAIXA APOIO INDEPENDENTE

PERSONALIZAÇÃO APOIO INDEPENDENTE

INFORMAÇÃO: O APOIO INDEPENDENTE PODE SER:

ARTICULADO	BI-ARTICULADO
<input type="radio"/> ARTICULADO	<input checked="" type="radio"/> BI-ARTICULADO

TIPO DE ARTICULAÇÃO

ARTICULAÇÃO APENAS NO JOELHO ARTICULAÇÃO NO JOELHO E NO TORNOZELO

ESCLARECIMENTO

ARTICULAÇÃO APENAS NO JOELHO

ARTICULAÇÃO NO JOELHO E NO TORNOZELO

VOU ESCOLHER UM TAMANHO FORA DO PADRÃO PARA O APOIO INDEPENDENTE

MODULAÇÃO DO APOIO DE PÉ

TAMANHO GRANDE TAMANHO MEDIO TAMANHO PEQUENO FALTA ESCOLHER

OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo de escolha do apoio de pé

- ITENS ADICIONAIS PARA O APOIO DE PÉ

Neste processo você escolherá os itens adicionais para apoio de pé. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ITENS ADICIONAIS PARA O APOIO DE PÉ

MODULAÇÃO ESCOLHIDA NA CADEIRA => SEM ESCOLHA - TAMANHO - 0

FAIXA DE VELCRO

APOIO DE PERNAS - ESCOLHA MATERIAL

REVESTIMENTO DO APOIO DE PÉ

COMPENSAÇÃO EM PLACA DE E.V.A.

INSEIR FAIXA DE VELCRO

NO TORNOZELO

NO ANTE PÉ

MEDIDAS DA FAIXA DE VELCRO

0,0 CM

0,0 CM

TORNOZELO ANTE PÉ

APOIO EM P.A.D.

APOIO EM MADEIRA

FALTA ESCOLHER

TIPO DE APOIO PARA PERNAS

FALTA ESCOLHER

APOIO PLACA PLANA

APOIO EM CALÇA

Supporte de pernas calça

DEFINIR O TIPO DE REVESTIMENTO

REVESTIMENTO EM ESPUMA

REVESTIMENTO VISCO ELASTICO

FALTA ESCOLHER

demonstração do processo de escolha do itens adicionais para o apoio de pé

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DO APOIO DE BRAÇO

Neste processo você escolherá o apoio do braço. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ESCOLHA DO APOIO DE BRAÇO
MODULAÇÃO ESCOLHIDA NA CADEIRA =>
SEM ESCOLHA - TAMANHO - 0

TIPOS DE APOIO DE BRAÇO

APOIO PLANO ESTREITO
 APOIO PLANO LARGO (MOBI)
 APOIO EM CALHA
 APOIO FRONTAL DE BRAÇO






INFORMAÇÃO:
OS APOIOS PLANOS (ESTREITO E LARGO) E O APOIO EM CALHA SÃO TAMANHO ÚNICO - UNIVERSAL

OPCIONAL

FAIXA PARA ANTEBRAÇO E PUNHO



OBSERVAÇÕES - COMENTARIOS

INSIRA AQUI SEU COMENTARIO

TAMANHO APOIO FRONTAL

PEQUENO
 MEDIO
 GRANDE

demonstração do processo de escolha do apoio de braço

- ESCOLHA DO APOIO DE CABEÇA

Neste processo você escolherá o apoio de cabeça. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ESCOLHA DO APOIO DE CABEÇA
MODULAÇÃO ESCOLHIDA NA CADEIRA =>
SEM ESCOLHA - TAMANHO - 0

TIPOS DE APOIO DE CABEÇA

BIOFORMA - COM VELUDO
 BIOFORMA NA HASTE DO CURVO
 CURVO
 CURVO COM APOIO CERVICAL
 CURVO COM ORELHAS







TAMANHO BIOFORMA

PEQUENO
 GRANDE

ALTA ESCOLHER

TAMANHO BIOFORMA HASTE

PEQUENO
 GRANDE

ALTA ESCOLHER

TAMANHO CURVO

PEQUENO
 GRANDE

ALTA ESCOLHER

TAMANHO APOIO CABEÇA

PEQUENO - CADEIRAS 34
 GRANDE - CADEIRAS 36-40-44

ALTA ESCOLHER

TAMANHO CURVO COM ORELHAS

PEQUENO - CADEIRAS 34
 GRANDE - CADEIRAS 36-40-44

ALTA ESCOLHER

OBSERVAÇÕES - COMENTARIOS

INSIRA AQUI SEU COMENTARIO

demonstração do processo de escolha do apoio de cabeça

- ESCOLHA DO CINTO PARA TRONCO

Neste processo você escolherá o cinto para tronco. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

10

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

ESCOLHA DO CINTO PARA TRONCO

ESCOLHA O TAMANHO DO CINTO PARA TRONCO
SEM CINTO
NÃO COLOCAR CINTO DE TRONCO

COM CINTO
TAMANHO PEQUENO
TAMANHO GRANDE

TIPOS DE CINTOS PARA O TRONCO
 CINTO SUSPENSO EM ESCAPULAR
 FALTA ESCOLHER
 CINTO TORAXICO EM "Y"
 CINTO "BANHO"
 CINTO CANGOTA

VERSÃO "SIMPLES"
VERSÃO "ESPECIAL"
DEFINA O TIPO DE CINTO CAPSOTA
 VERSÃO SIMPLES
 VERSÃO ESPECIAL
 FALTA ESCOLHER

FIXAÇÃO EXTRA
 CINTO PERSONAL

OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo do cinto para tronco

- ESCOLHA DO CINTO PARA QUADRIL

Neste processo você escolherá o cinto para quadril. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ESCOLHA DO CINTO PARA QUADRIL

ESCOLHA O TIPO DE CINTO PARA QUADRIL
SEM CINTO
NÃO COLOCAR CINTO DE QUADRIL

COM CINTO
TAMANHO PEQUENO
TAMANHO GRANDE

TIPOS DE CINTO PARA O QUADRIL
 CINTO PÉLVICO DE PONTO FIXO
 FALTA ESCOLHER
 CINTO PÉLVICO SOLTO
 CINTO PÉLVICO EM "Y"
 CINTO ABERTO COM FAIXA FLEXÍVEL DE QUADRIL
 CINTO PÉLVICO EM "H"

LOCALIZAÇÃO DO CINTO PÉLVICO PONTO FIXO
 DIREITO
 ESQUERDO
 FALTA ESCOLHER

FIXAÇÃO EXTRA
 CINTO ABORNAL

OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo do cinto para quadril

- ESCOLHA DO TIPO DA MESA

Neste processo você escolherá o tipo da mesa. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara.

ESCOLHA DO TIPO DE MESA

ESCOLHA O TIPO DE MESA
 MESA PLÁSTICA
 SEM MESA
 MESA DE MADEIRA COM BORDA
 MESA DE MADEIRA SEM BORDA

ESCOLHA TAMANHO MESA PLÁSTICA
 TAMANHO 34 - 40 X 50
 TAMANHO 36-40 - 60 X 60
 TAMANHO 44-46 - 70 X 70
 FALTA ESCOLHER

ESCOLHA TAMANHO MESA MADEIRA
 TAMANHO 34 - 40 X 50
 TAMANHO 36-40 - 60 X 60
 TAMANHO 44-46 - 70 X 70
 FALTA ESCOLHER


OBSERVAÇÕES - COMENTÁRIOS
INSIRA AQUI SEU COMENTÁRIO

demonstração do processo do tipo da mesa

PASSO 3 - "Monte aqui sua cadeira de rodas"

- ESCOLHA DOS ACESSÓRIOS ADICIONAIS (FINAIS)

Neste processo você escolherá os acessórios adicionais. Clique na opção que desejar. Qualquer informação que não esteja na ficha, você poderá preencher na caixa "observação" de forma clara. Observe que o suporte de pescoço é uma opção para ser posicionada no pescoço da criança e que não deverá estar fixado na cadeira de rodas ou cadeirinha de carro.

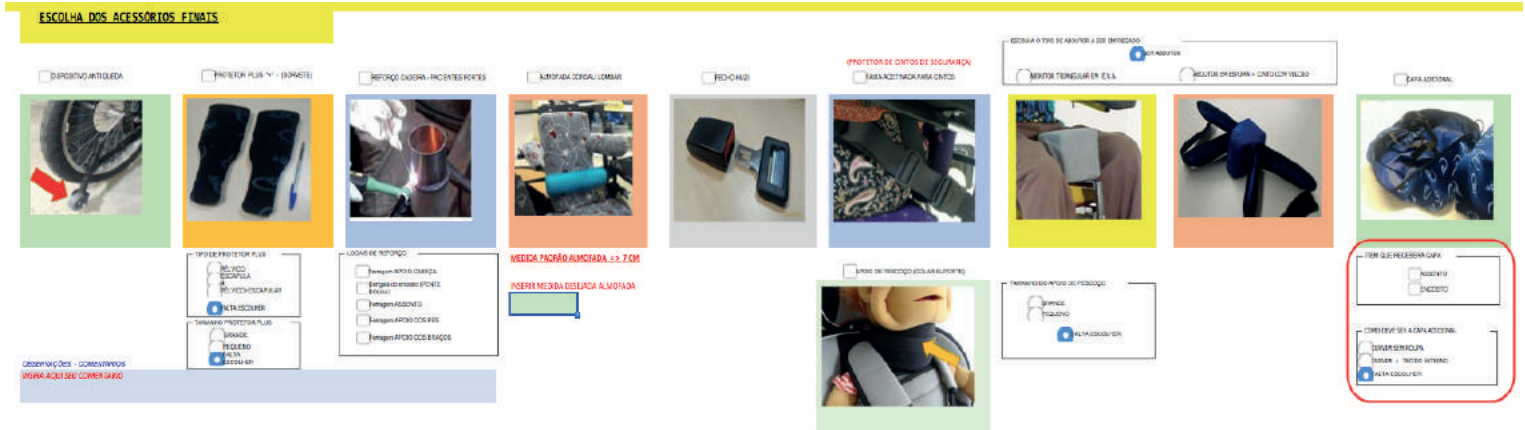

demonstração do processo da escolha dos acessórios finais

Finalizado todos esses itens e conferidos, você irá para a aba na parte inferior da planilha com o nome "Ficha de Produção - Expansão".

PASSO 4 - "Ficha de produção - Expansão"

Esta etapa é onde a ficha de prescrição será gerada com base nas escolhas feitas durante o processo de preenchimento da ficha e você poderá conferir o que será encaminhado para nós. A ficha terá a interface como a seguinte imagem. Usamos medidas de exemplo.

APOIO BRAÇO:	APOIO MOBI (LARGO)		TAMANHO:	ÚNICO
APOIO CABEÇA:	BIOFORMA HASTE DO CURVO		TAMANHO:	PEQUENO
CINTO DE FIXAÇÃO DE TRONCO	CINTO TORÁXICO EM "H"	CINTO DE FIXAÇÃO DE QUADRIL	CINTO PÉLVICO EM "V" (PORTUGAL)	
	TAMANHO PEQUENO		TAMANHO PEQUENO	
MESA	MESA PLASTICA		TAMANHO:	36-40 - (60CM X 60CM)
OBSERVAÇÕES - ACESSÓRIOS FINAIS				
PROTECTOR PLUS (SORVETE)		PÉLVICO - SEM ESCOLHA		
		REFORÇO CADEIRA PARA PACIENTES FORTES		

exemplo da ficha preenchida

PASSO 4 - "Ficha de Produção - Expansão"

Ao final da ficha você encontrará os campos "Produção", "Planejamento" e "Liberação da Qualidade". Estes campos são reservados para preenchimento interno da Expansão.

PRODUÇÃO:		PLANEJAMENTO:	
ACABAMENTO	COSTURA	CARIMBO	
___/___/___	___/___/___	DATA	
		VISTO	
LIBERAÇÃO DA QUALIDADE:			
ASSINATURA:		DATA: ___/___/___	

demonstração dos campos a serem deixados em branco

IMPORTANTE: Caso algum item não seja devidamente preenchido ele aparecerá como a imagem abaixo. A ausência desse preenchimento será entendida que o item não deverá ser incluso.

FICHA DE PRODUÇÃO DE CADEIRA

PEDIDO:	PEDIDO	TO/FISIO:	FISIO / T.O. EXP	REVENDA:	REVENDA
#VALOR!		VENDEDOR:	CONTATO EXPAN	USUÁRIO:	NOME
PRAZO PARA PRODUÇÃO	PRODUTO OBJETIVADO PELO CLIENTE		SEM ESCOLHA MODELO SEM ESCOLHA	APENAS INFORMAÇÃO PRAZO ACORDADO CLIENTE INSERIR DATA	
COR DO TECIDO:	SEM ESCOLHA				
CHASSIS:	SEM ESCOLHA	TAMANHO:	FALTA TAMANHO		
ASSENTO:	SEM ESCOLHA	TAMANHO:			
ENCOSTO:	SEM ESCOLHA	TAMANHO:			
ESTABIL - TRONCO	SEM ESTABILIZADOR	ESTABIL - QUADRIL	SEM ESTABILIZADOR		
APOIO PÉ:	SEM ESCOLHA				
MODULAÇÃO					

PASSO 5 - Salvando sua ficha

Uma vez que a ficha for gerada e conferida, você poderá salva-la para o envio. Não esqueça de renomea-la com o nome do paciente ou número de pedido para próprio controle.